

OXMED NAUDOJIMO PATARIMAI ZENSETIV HIDROKOLOIDINĖ PASTA



Papildoma informacija

I klasės medicinos priemonė. Prieš naudojimą perskaitykite gamintojo naudojimo instrukciją.



Rask mane
žemiau!

Privalumai

- Sumažina pratekėjimą tarp odos ir rinktuvo plokštėlės
- Užtikrina tvirtą prigludimą, užpildydama įdubas ir raukšles
- Apsaugo odą nuo agresyvių išskyrų
- Lengva naudoti, formuoti ir tepti
- Draugiška odai
- Nesukelia peršėjimo
- Sudėtyje nėra alkoholio



1 žingsnis Nuvalykite ir nusausinkite odos plotą aplink stomą.



2 žingsnis Tepkite pastą tiesiai ant odos.



3 žingsnis Pasta užtepta.




4 žingsnis Formuokite pastą, geriausia drėgnais pirštais.





5 žingsnis Pasta tinkamai užtepta.

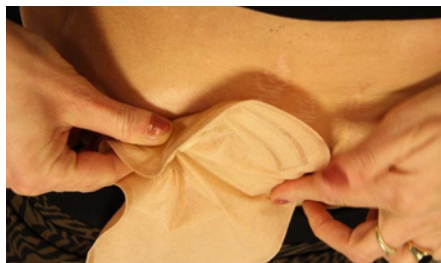

6 žingsnis Uždėkite odos plokštelę ant odos.

Pastą taip pat galima tepti tiesiai ant rinktuvo plokštelės.



1 žingsnis Nuvalykite ir nusausinkite odos plotą aplink stomą.



2 žingsnis Tepkite pastą tiesiai ant odos plokštelės.



3 žingsnis Jei reikia, formuokite pastą, geriausia drėgnais pirštais.



4 žingsnis Uždėkite odos plokštelę su užtepta pasta ant stomos.

ISSUE 01.2023-12



OxMed International GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein, Vokietij
ja info@oxmed.com | oxmed.com

UAB Aguomeda
info@aguomeda.lt
+370 66 22 77 33
aguomeda.lt | oxmed.lt



Ar radote Akseuarą?
Jis yra prie nuotraukos 3

oxmed
Call us friendly