



Дополнительная информация
Медицинское изделие класса I. Перед использованием прочитайте инструкцию производителя.

Преимущества

- Уменьшает подтекание между кожей и пластиной калоприёмника
- Обеспечивает плотное прилегание, заполняя впадины и складки
- Защищает кожу от агрессивных выделений
- Легко использовать, формировать и наносить
- Бережно относится к коже
- Не вызывает жжения
- Не содержит спирта



Шаг 1 Очистите и высушите участок кожи вокруг стомы.



Шаг 2 Нанесите пасту непосредственно на кожу.



Шаг 3 Паста нанесена.




Шаг 4 Сформируйте пасту, лучше влажными пальцами.





Шаг 5 Паста нанесена правильно.

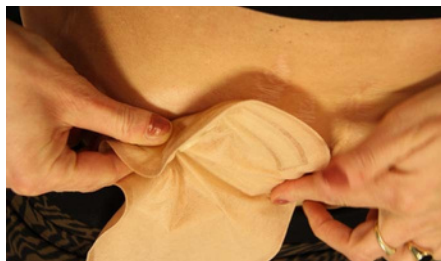

Шаг 6 Установите пластину на кожу.

Пасту также можно наносить непосредственно на пластину калоприёмника.



Шаг 1 Очистите и высушите участок кожи вокруг стомы.



Шаг 2 Нанесите пасту непосредственно на пластину калоприёмника.



Шаг 3 При необходимости сформируйте пасту, лучше влажными пальцами.



Шаг 4 Установите пластину с нанесённой пастой на стому.

Номер 01.2023-12



OxMed International GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein, Герман
ия info@oxmed.com | oxmed.com

UAB Aguomeda
info@aguomeda.lt
+370 66 22 77 33
aguomeda.lt | oxmed.lt



Вы нашли аксессуар?
Он находится у фотографии 3

oxmed
Call us friendly