

OXMED NAUDOJIMO PATARIMAI ZENSETIV HIDROKOLOIDINIAI ŽIEDAI



Papildoma informacija

I klasės medicinos prietaisas, prieš naudojimą perskaitykite gamintojo naudojimo instrukciją.



Rask mane
žemiau!


Privalumai

- Optimali odos apsauga
- Užtikrina tvirtą prigludimą užpildant įdubas ir raukšles Sumažina pratekėjimą tarp odos ir odos plokštelės
- Saugus, tvirtas ir patikimas barjeras
- Formuojamas: tinkamas įvairių tipų ir dydžių stomoms
- Lengva naudoti, formuoti ir uždėti
- Suderinamas su visų tipų stomos gaminiais
- Nedirginantis
- Be alkoholio
- Be latekso
- Be gyvūninės kilmės ingredientų



1 žingsnis

Įsitikinkite, kad medžiagos paruoštos naudojimui. Atidarykite dėžutę ir išimkite žiedą.

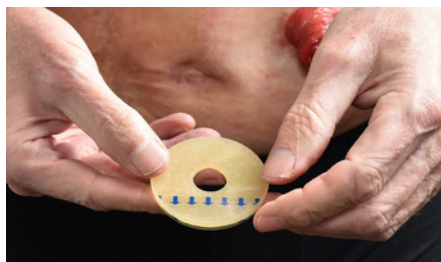

2 žingsnis

Laikykite žiedą taip, kad apsauginę medžiagą būtų galima lengvai nulupti.



3 žingsnis

Nulupkite apsauginę medžiagą nuo žiedo.



4 žingsnis

Suformuokite žiedą į norimą formą ir dydį, traukdami jo kraštus smiliumi ir nykščiu.





5 žingsnis

Uždėkite žiedą ant stomos. Prieš uždedant įsitikinkite, kad oda aplink stomą yra švari ir sausa.



6 žingsnis

Švelniai prispauskite, kad žiedas priklistų prie odos. ZenSetiv hidrokoloidinis žiedas turi stiprų pradinį sukibimą, užtikrinantį puikų prikibimą tarp žiedo ir odos bei tarp žiedo ir odos plokštelės.



7 žingsnis

Žiedas uždėtas. Priklijuojant žiedą prie odos, atminties efektas fiksuojamas ir žiedas puikiai priglunda aplink stomą.



8 žingsnis

Uždėkite odos plokštelę ant stomos ir aplink esančio žiedo. Švelniai patrinkite plokštelę, kad ji priklistų prie žiedo ir po juo esančios odos.

ATMINTIES EFEKTAS

ZenSetiv hidrokoloidinis žiedas turi atminties efektą. Žiedą galima ištempti į platesnę formą nei reikia, taip palengvinant uždėjimą, ir jis palaipsniui grįš į pradinę formą, užtikrindamas tikslių priglundimą.




1 žingsnis

Žiedas pradinės formos.




2 žingsnis

Ištempkite žiedą į platesnę formą nei reikia, kad būtų lengviau uždėti aplink stomą.

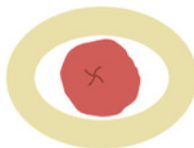

3 žingsnis

Uždėkite žiedą aplink stomą – atminties efektas užtikrins, kad žiedas palaipsniui grįš į pradinę formą.

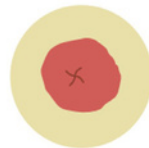

4 žingsnis

Priklijuojant žiedą prie odos, jis fiksuojamas ir puikiai priglunda aplink stomą.



Oxmed International GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein, Deutschland
info@oxmed.com | oxmed.com

UAB Aguomeda
info@aguomeda.lt
+370 66 22 77 33
aguomeda.lt | oxmed.lt

ISSUE 01.2024-01



Ar radote Akseuarą? Jis
yra prie 3 paveikslėlio

oxmed
Call us friendly