



Дополнительная информация
Медицинское изделие I класса, перед использованием прочитайте инструкцию производителя.


Преимущества

- Оптимальная защита кожи
- Обеспечивает плотное прилегание, заполняя впадины и складки Уменьшает протекание между кожей и пластиной
- Надёжный, прочный и проверенный барьер
- Формируемое: подходит для различных типов и размеров стом
- Легко использовать, формировать и накладывать Совместимо со всеми типами стомийных изделий
- Не раздражает
- Без спирта
- Без латекса
- Без ингредиентов животного происхождения



1 шаг

Убедитесь, что материалы готовы к использованию. Откройте коробку и извлеките кольцо.

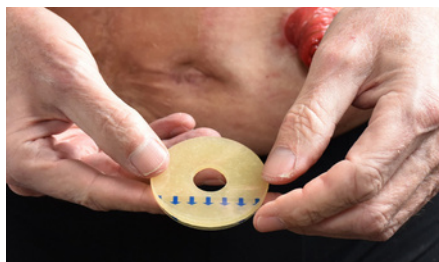

2 шаг

Держите кольцо так, чтобы защитный материал можно было легко снять.



3 шаг

Снимите защитный материал с кольца.



4 шаг

Сформируйте кольцо до нужной формы и размера, растягивая его края указательным и большим пальцами.





5 шаг

Наложите кольцо на стому. Перед наложением убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая.



6 шаг

Аккуратно прижмите, чтобы кольцо приклеилось к коже. Гидроколлоидное кольцо ZenSetiv обладает сильной начальной адгезией, обеспечивающей отличное сцепление между кольцом и кожей, а также между кольцом и кожной пластиной.



7 шаг

Кольцо наложено. При приклеивании кольца к коже эффект памяти фиксируется, и кольцо идеально прилегает вокруг стомы.



8 шаг

Наложите кожную пластину на стому и окружающее кольцо. Аккуратно потрите пластину, чтобы она приклеилась к кольцу и коже под ним.

ЭФФЕКТ ПАМЯТИ

Гидроколлоидное кольцо ZenSetiv обладает эффектом памяти. Кольцо можно растянуть шире, чем необходимо, для облегчения наложения, и оно постепенно вернётся к исходной форме, обеспечивая точное прилегание.




1 шаг

Кольцо в исходной форме.




2 шаг

Растяните кольцо шире, чем необходимо, чтобы было легче наложить его вокруг стомы.

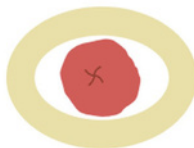

3 шаг

Наложите кольцо вокруг стомы — эффект памяти обеспечит постепенное возвращение кольца к исходной форме.

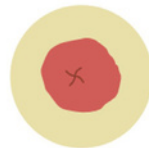

4 шаг

При приклеивании кольца к коже оно фиксируется и идеально прилегает вокруг стомы.

ISSUE 01.2024-01



Oxmed International GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein, Deutschland
info@oxmed.com | oxmed.com

UAB Aguomeda
info@aguomeda.lt
+370 66 22 77 33
aguomeda.lt | oxmed.lt



Нашли аксессуар? Он на картинке 3

oxmed
Call us friendly